



# Un sistema en el que puede confiar

## InnoSpire Essence, sistema de nebulización de Philips Respironics

### Una elección fiable

InnoSpire Essence es parte de nuestra familia InnoSpire de sistemas de nebulización, que ofrece a los pacientes en el domicilio, una administración de fármaco rápida, eficaz y fiable.

### Alta tecnología en nebulización

El sistema de nebulización InnoSpire Essence, utiliza nuestra tecnología SideStream, el nebulizador con mayor precisión y calidad de Philips Respironics. Esto permite mejorar las prestaciones del sistema en la producción de aerosol, para administrar un tratamiento mucho más eficaz y rápido.

### Principales características


- Diseñado para obtener el máximo rendimiento de la tecnología SideStream
- Tiempos de tratamiento más breves (6-8 minutos\*)
- Diseño compacto, ligero y de fácil mantenimiento

**PHILIPS**  
RESPIRONICS



## InnoSpire Essence y nebulizador SideStream, el conjunto perfecto para el máximo rendimiento

InnoSpire Essence dispone de la tecnología SideStream, nuestro nebulizador de altas prestaciones, para un aprovechamiento máximo del tratamiento administrado. El SideStream está equipado con un sistema Venturi que optimiza la producción de aerosol y la administración de este, ofreciéndole un tratamiento mucho más rápido (2,5 ml en aprox. 6 minutos). Es muy eficiente (72% del volumen de salida del medicamento es menor de 5 micras), y tiene un bajo volumen residual (0,5 ml).

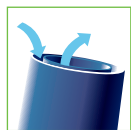

El sistema Venturi le ofrece una administración más rápida y un menor tiempo de tratamiento que los nebulizadores convencionales



El diseño innovador del nebulizador produce un aerosol de alta calidad de partícula en tiempos muy ajustados

Philips Respironics, InnoSpire, Essence y SideStream son marcas comerciales de Koninklijke Philips N.V. y sus filiales, reservados todos los derechos.

### Datos de rendimiento

DMMA	2,9 µm
Fracción de partículas finas	77 % por debajo de 5 µm
Tiempo de tratamiento (carga de 2,5 ml)	6-8 minutos

### Descripción del producto (con voltaje/frecuencia)

Descripción del producto (con voltaje/frecuencia)	N° de ref.
Essence 230V/50 Hz enchufe UE	1099967
Essence 220V/60 Hz enchufe coreano	1099965
Essence 220V/60 Hz enchufe UK	1099964
Essence 220V/60 Hz enchufe Estados Unidos	1102174
Paquete SideStream reutilizable anual	2010A
Kit SideStream reutilizable con máscara para adultos	1223A
Kit SideStream reutilizable con máscara pediátrica	1224A
Kit SideStream reutilizable con boquilla	1225A
Filtros de entrada de aire (paquete de 4)	1102088
Paquete mensual desechable SideStream (paquete de 40)	2350
Paquete desechable SideStream con mascarilla para adultos (paquete de 50)	4446
Paquete desechable SideStream con mascarilla pediátrica (paquete de 50)	4447
Paquete desechable SideStream con adaptador bucal (paquete de 50)	4448

### Especificaciones técnicas

Alimentación eléctrica	230V/50 Hz, 1 Amp	220V/60 Hz, 1,2 Amp
Máx. presión de compresor	317 kPa (46 psi)	296 kPa (43 psi)
Velocidad media de caudal	6 lpm @ 10 psig	7 lpm @ 10 psig
Velocidad máx. de caudal	8,0 lpm	9,3 lpm
Protector de sobrecarga	Fusible térmico; temperatura de funcionamiento 150 °C	
Peso	1,5 kg	
Dimensiones (l x an x al):	165 x 165 x 108 mm	
Nivel de ruido	58 ±3 dBA	

\*datos contenidos en el archivo de Philips Respironics

Visite [www.philips.com/innospire](http://www.philips.com/innospire) para obtener más información



© 2015 Koninklijke Philips N.V. Todos los derechos reservados.

Philips Healthcare se reserva el derecho de realizar cambios en las especificaciones y/o de dejar de fabricar cualquier producto en cualquier momento sin previo aviso ni obligaciones y no se considera responsable de las consecuencias derivadas de la utilización de esta publicación.

Philips Respironics Iberia  
+34 91 566 90 00

Respironics Respiratory Drug  
Delivery (UK) Ltd  
Chichester Business  
Park, City Fields Way  
Tangmere, Chichester PO20 2FT  
United Kingdom

[www.philips.com/respironics](http://www.philips.com/respironics)

Broudy CSP 1/26/15 MCI 4106540 PN 1106344